
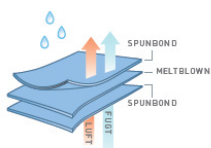


## PRIMARY

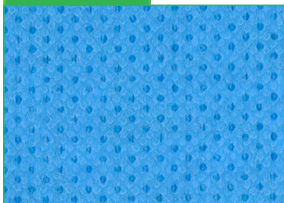


BESKYTTELSE	KOMFORT
1 drop	4 hearts

### SMS

- Væskeafvisende for at give den nødvendige beskyttelse
- Nonwoven polypropylen fibre
- Spunbond giver styrke, meltblown giver væskeafvisning
- Letvægtsmateriale giver ekstra komfort
- EN13795 Standard Ydeevne/Høj Ydeevne

## UNIVERSAL

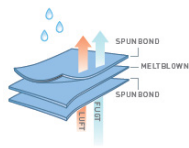


BESKYTTELSE	KOMFORT
3 drops	3 hearts

### SMS

- Meget væskeafvisende for at give ekstra beskyttelse
- Nonwoven polypropylen fibre
- Spunbond giver styrke, øget meltblown giver mere væskeafvisning
- Behandlet for at give øget afvisning over for væske med lav overfladespænding, f.eks. blod
- EN13795 Standard Ydeevne/Høj Ydeevne
- AAMI Niveau 3

## CLASSIC

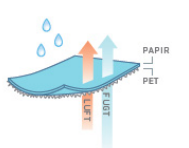


BESKYTTELSE	KOMFORT
3 drops	3 hearts

### Spunlace

- Væskeafvisende spunlace giver standard beskyttelse
- Nonwoven pulp/ polyester fibre
- Blødt og åndbart materiale giver høj komfort
- EN13795 Standard Ydeevne/Høj Ydeevne
- AAMI Niveau 2/AAMI Niveau 3

## ULTIMATE


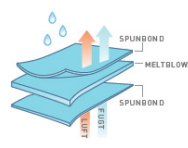


BESKYTTELSE	KOMFORT
4 drops	4 hearts

### Blød SMS

- Ekstra væskeafvisende materiale giver avanceret beskyttelse
- Nonwoven polypropylen fibre
- Spunbond giver styrke, øget meltblown giver mere væskeafvisning
- Behandlet for at give øget afvisning over for væske med lav overfladespænding, f.eks. blod
- Meget blødt og åndbart materiale giver ultimativ komfort
- EN13795 Standard Ydeevne/Høj Ydeevne
- AAMI Niveau 3

## FPP\*

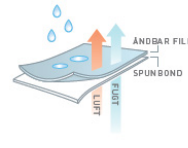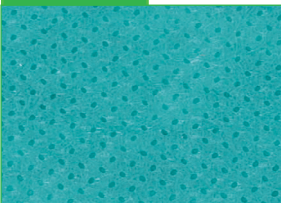

BESKYTTELSE	KOMFORT
5 drops	1 heart

### 2-lags laminat

- Materiale med den højeste beskyttelse, fuldstændig ugennemtrængelig for kropsvæsker
- Mikroporøs polyetylen film og polyester/polyetylen nonwoven komfortlag
- Mikroporerne lader luft og væske transportere fra kroppen til ydersiden af kitlen, og filmen beskytter mod blod- og væskegennemtrængning. Komfortlaget mod huden øger kitlens generelle komfort
- Ultralet, åndbart materiale giver god varmekomfort
- EN13795 Høj Ydeevne
- AAMI Niveau 3

\* FPP = Fluid Protection Plus

# BARRIER® Operationskitler Materialer

De varierende krav til operationer skaber et behov for forskellige kombinationer af beskyttelse og komfort.

Med BARRIER® Operationskitlers forskellige materialer får du:


- forskellige beskyttelsesniveauer – fra et basis niveau til et avanceret niveau beregnet til indgreb med højt væskniveau
- kitler der lever op til EN13795<sup>1</sup> & AAMI<sup>2</sup> standarder
- høje komfort niveauer – fra letvægt til ekstremt blødt og yderst åndbart materiale

BARRIER® Operationskitler, Høj Ydeevne (EN13795 HP) er forstærkede i det kritiske område, på forsiden og på ærmerne, for at maksimere beskyttelsen mod kontaminering af operationssåret.

#### PRIMARY & UNIVERSAL

##### Forside- & ærmeforstærkning

- Ugennemtrængelig polyetylen plastik film
- Komfortlag i polyester nonwoven

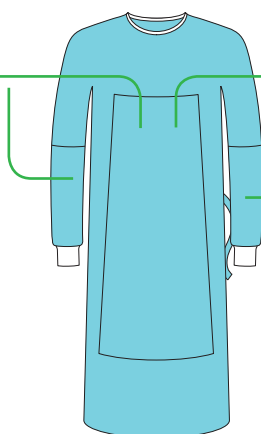

#### CLASSIC & ULTIMATE

##### Forsideforstærkning


- Ugennemtrængelig polyetylen plastik film (åndbar)

##### Ærmeforstærkning

- Ugennemtrængelig polyetylen plastik film
- Absorberende komfortlag i viskose/polyester nonwoven

## Vælg den rette operationskittel til det rette indgreb.

Vores sortiment er udviklet, så det tilbyder den optimale kombination af beskyttelse og komfort - fra korte, simple lavrisiko indgreb til lange, komplicerede indgreb med meget væske. Primary sortimentet lever op til EN13795<sup>1</sup>. Alle andre BARRIER operationskitler lever op til både EN13795 og AAMI<sup>1,2</sup>.

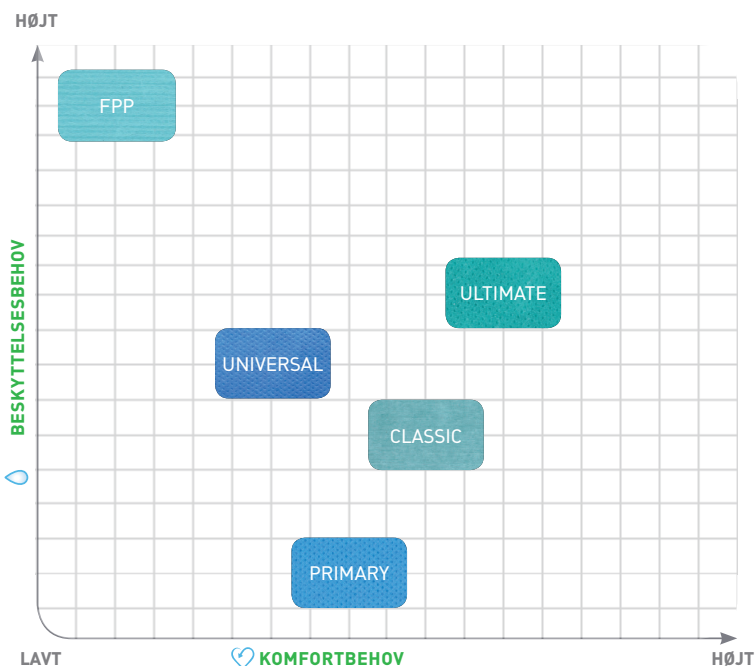

#### 🔹 KRAV TIL BESKYTTELSE

- Væskeniveau
- Indgrebs varighed

#### 📍 KRAV TIL KOMFORT

- Åndbarhed
- Blødhed
- Design og pasform
- Mange størrelser

#### Referencer

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0741710

  
**Mölnlycke®**