


# Laparoskopisk suge- og skyllesæt


Truly customised laparoscopic solutions

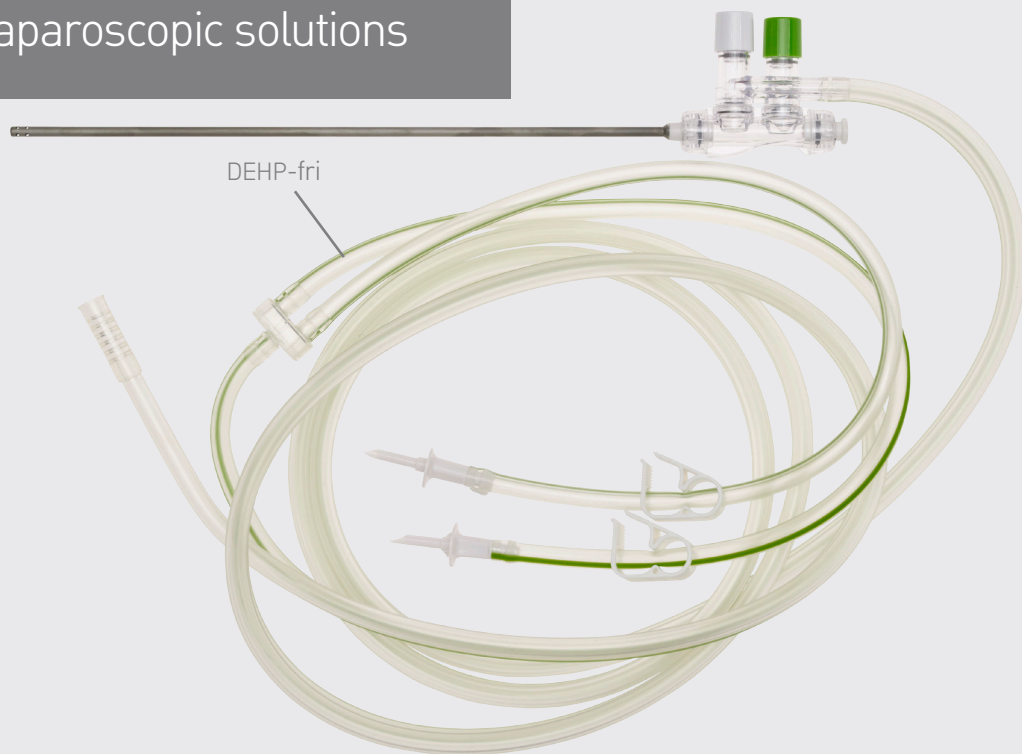

Laparoskopisk suge- og skyllesæt er designet med henblik på effektiv og nem aspiration og/eller irrigation i forbindelse med laparoskopiske procedurer. Det holder bughulen fri for væske og blod og sikrer, at det kirurgiske indgreb foregår sikkert og effektivt.

- Ergonomisk design. Håndstykket kan betjenes med begge hænder
- Gennemsigtigt håndstykke, som giver uhindret visualisering
- Envejsventil forhindrer saltvand i at løbe tilbage
- Blød DEHP-fri slange med lavt drejemoment og easy-peel-adskillelse
- Leveres i to længder – 33 cm og 45 cm
- Slange med to spidser for størst mulig fleksibilitet
- Farve- og bogstavkodede knapper til tydelig identifikation af funktioner
- Proksimal irrigation tillader gennemskylning ved blokering
- Proksimal membran giver mulighed for indføring af 3 mm instrumenter, og man undgår udslip af CO<sub>2</sub> og væske
- Kompatibel med 10 mm sugesonde
- Matteret skaft eliminerer blænding med koldt lys
- Distale laterale huller og en atraumatisk spids forhindrer beskadigelse af kropsvæv

Leveres både som sterilt produkt, der er pakket enkeltvis, og til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker.

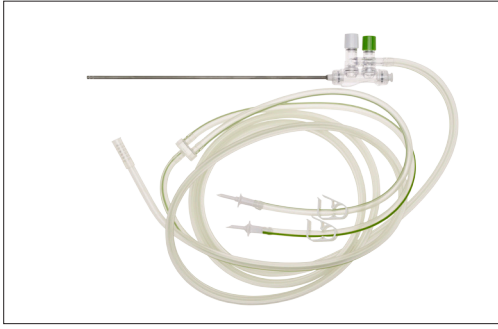

Suge- og skyllesæt



Suge- og skyllesæt - håndstykke

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Længde	Pakning*
899107	Suge- og skyllesæt med to spidser	5 mm	33 cm	10/20
899108	Suge- og skyllesæt med to spidser	5 mm	45 cm	10/20
899109	Rør til suge- og skyllesæt	10 mm	33 cm	10/20

\*inderæske/transportkarton

Alle suge- og skyllesæt fremstilles med DEHP-fri slanger.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS. Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf. 48 168 268. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke varemærker, navne og ogoer er registreret globalt for en eller flere af  
Mölnlycke Health Care Group's virksomheder. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0791612



**Mölnlycke®**